




MÁY PHÂN PHỐI CHẤT LỎNG TỰ ĐỘNG KingTubeAuto - B

- ✓ Thao tác sử dụng đơn giản mà hiệu quả
- ✓ Máy bơm nhu động chính xác và mạnh mẽ
- ✓ Tiện dụng có thể di chuyển linh động và vệ sinh một cách dễ dàng
- ✓ Giao diện thân thiện với người dùng
- ✓ Bảo hành 03 năm

MÔ TẢ

- KingTubeAuto - B – Máy phân phối chất lỏng tự động là một giải pháp cho các phòng thí nghiệm.
- Nguyên lý hoạt động là phân phối các mẫu dựa theo trọng lượng đơn giản mà hiệu quả. Các thao tác được tự động hoá nhanh chóng, chính xác và người dùng dễ dàng theo dõi.
- Với máy bơm nhu động chính xác và mạnh mẽ làm cho hệ thống hoạt động ổn định và đạt năng suất cao.

CẤU TẠO

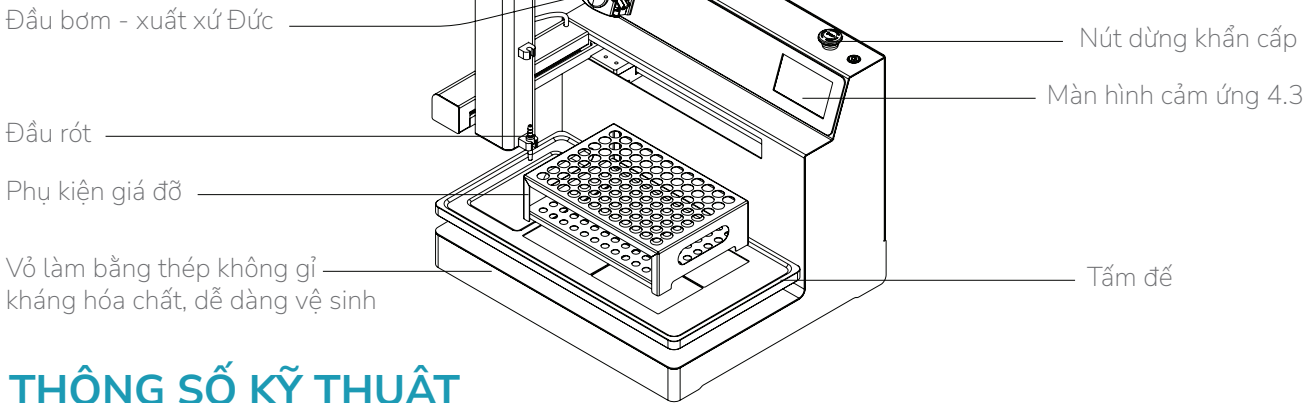


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	KingTubeAuto-B
Thể tích phân phối	100 μ L to 100 L
Đầu bơm	1
Độ chính xác với ống \varnothing 3,2mm	10 mL: >98% - 20 mL: >99% - 225 mL: >99.5%
Đường kính trong của ống	1.6mm, 2.4mm, 3.2mm
Độ dày thành ống	1.6mm
Flow rates	1.5 mL/mn to 198 mL/min
Thời gian phân phối cho ống 3mL	32 ống/phút

Thời gian phân phối cho ống 10mL	12 ống/phút
Số khay cho 96 ống (10mL-20mL)	1
Số khay cho 96 ống (2mL-5mL)	2
Số khay 96 giếng	4
Hành trình trục	X:305, Y:150, Zmax:130, Zmin : 10
Tốc độ quay đầu bơm	10-400rpm
Đường ống được cung cấp bởi hãng	Longer Pump
Kích thước (DxRxC)	Dài 460 x Rộng 390 x Cao 513 mm
Khối lượng	15kg
Nguồn điện	220-240 V~ 50-60 Hz
Công suất	80W
Màn hình điều khiển	Màn hình cảm ứng
Khay chống tràn	✓
Vật liệu Thép Không Gỉ (Inox 304)	✓
Sản xuất tại Việt Nam	✓
Bảo Hành 03 Năm	✓

PHỤ KIỆN

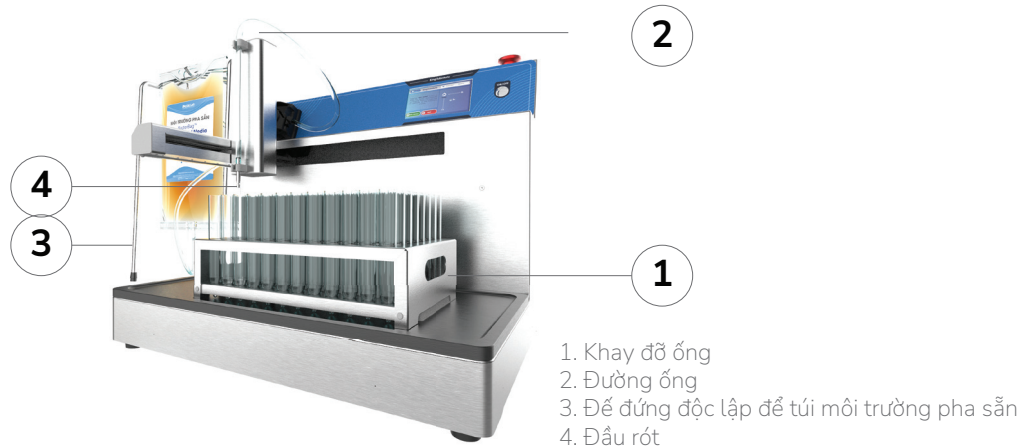

Sản phẩm	Mã Đặt Hàng	Mô tả	
	Khay đỡ cho 96 ống(2mL-5mL)	KingRack 2	Khay thép không gỉ cho ống 2mL - 5mL
	Khay đỡ cho 96 ống(10mL-20mL)	KingRack 10	Khay thép không gỉ cho ống 10mL - 20mL
	Khay đựng cho 96 giếng	DeepWell96	Khay thép không gỉ sử dụng cho 96 giếng
	Đế đứng độc lập để túi môi trường pha sẵn	KingStand	Đế đứng giữ 2 túi môi trường pha sẵn (3-5mL)
	Kim đâm túi môi trường pha sẵn	KingTrocar	Kim đâm miệng túi môi trường pha sẵn kết nối với đường ống
	Đầu rót (ø 1.6, 2.4, mm)	KingNozzle-S	Chất liệu inox 304, sử dụng cho nhiều loại ống kích thước khác nhau
	Ống chìm (ø 3.2, 4.8, 6.4 mm)	KingTubeWeight-M	Chất liệu inox 304, sử dụng cho nhiều loại ống kích thước khác nhau
	Đường ống (ø 1.6 mm)	KingTubing 1.6	Đường kính bên trong ống ø 1.6 mm với độ dày của thành ống 1.6 mm
	Đường ống (ø 2.4 mm)	KingTubing 2.4	Đường kính bên trong ống ø 2.4 mm với độ dày của thành ống 1.6 mm
	Đường ống (ø 3.2 mm)	KingTubing 3.2	Đường kính bên trong ống ø 3.2 mm với độ dày của thành ống 1.6 mm