

**CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE**  
228/13/3 Nguyễn Thị Lăng, Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

## Test Report

Sampling:	Sample Not Drawn By Eurofins Consumer Product Testing Vietnam
Sample Description:	Ống lấy máu nhi EDTA/ Citrate/ Glucose 1 mL
CODE:	4110 / 4610 / 4910
MATERIAL:	PE
COLOR:	Blue; Green; Grey
Country Of Origin:	/
Delivery Condition:	Sample Received in Good Condition
Received On:	11/10/2023
Testing Period:	11/10/2023 - 17/10/2023

**RESULT SUMMARY**

#	TEST REQUESTED	PASS	FAIL	DATA
1	Centrifugal Force Test	X		
2	Tube Size test			X

Pass – Meets Performance Standard

Fail – Fails to Meet Performance Standard

\*\*\*\*\* FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE FOLLOWING PAGE(S) \*\*\*\*\*


This test report has been validated by:



 Henry Nguyen  
 General Manager SL & AN


Results obtained refers to the samples, products or materials received in the Laboratory, as described in above related sample description, and tested in conditions shown in present report. Eurofins Consumer Product Testing Vietnam Co., Ltd. ensures that this job has been performed according to our Quality System and complying contract and legal conditions. Reproduction of this document is only valid if it is done completely and under the written permission of Eurofins Consumer Product Testing Vietnam Co., Ltd. If you have any comments or complaints, please response by sending an email to [CPTVNcs@eurofins.com](mailto:CPTVNcs@eurofins.com) and referring to this report number

**SAMPLE PHOTO**

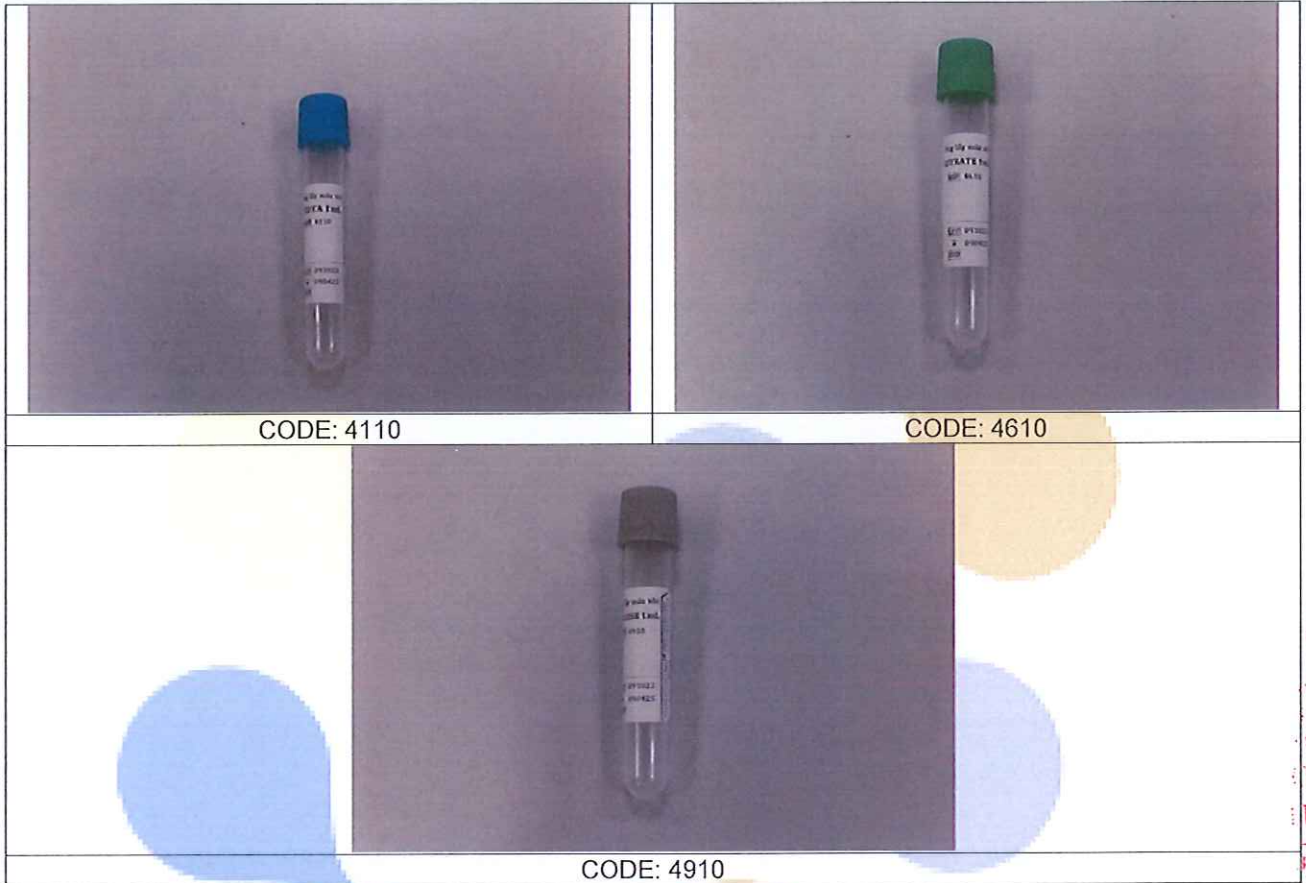



## TEST RESULT

### 1. CENTRIFUGAL FORCE TEST

Tested item(s)	Test method(s)	Test result(s)
Ống lấy máu nhi EDTA/ Citrate/ Glucose 1 mL CODE: 4110, 4610, 4910	Centrifuge at 6000 cycles/minute in 10 - 15 minutes	<b>PASS</b>

**PASS** – Meets the performance Standard. The tube does not leak/ break/ cracking after centrifugal at 6000 cycles per minute in 10 - 15 minutes.

### 2. TUBE SIZE TEST

Tested item(s)	Test method(s)	Test result(s)			Requirement (mm)
		Tube Length (mm)	Outer diameter (mm)	Inner diameter (mm)	
Ống lấy máu nhi EDTA/ Citrate/ Glucose 1 mL CODE: 4110, 4610, 4910	In-house	75.11	12.72	11.26	/
		75.14	12.78	11.20	
		75.11	12.79	11.20	
<b>AVERAGE</b>		<b>75.12</b>	<b>12.76</b>	<b>11.22</b>	
<b>CONCLUSION</b>		<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	<b>DATA</b>	

\*\*\* END OF THE REPORT \*\*\*