




Tủ Cân Mẫu Bột HUYAir PWB Elite

- ✓ Đáp ứng tiêu chuẩn: IEST, ISO 14644
- ✓ Vi xử lý với màn hình 4.3-inch
- ✓ Động cơ DC
- ✓ Bảo hành : 3 năm.


MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Tủ cân mẫu bột – HUYAir PWB Elite được thiết kế để bảo vệ người sử dụng trong quá trình cân, đo, đổ, trộn và thực hiện tất các hoạt động có liên quan bởi các bụi, hạt và bột của các hợp chất độc hại hoặc hóa chất lỏng.


ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

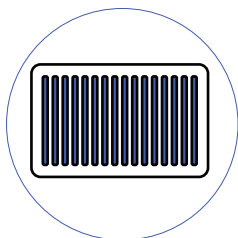

LỌC HEPA CAMFIL - THỤY ĐIỂN
HOẶC AAF - MỸ

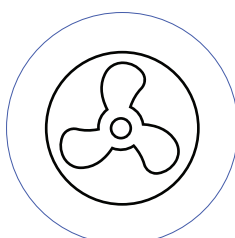

QUẠT LY TÂM
EBMpapst - ĐỨC

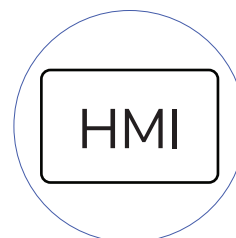


MÀN HÌNH
CẢM ỨNG 4.3 INCH

- ✓ Cấu trúc tủ: 2 lớp, vỏ ngoài và buồng đều bằng thép bằng thép kẽm mạ điện sơn tĩnh điện kháng hoá chất, UV và vi sinh.
- ✓ Cửa bằng kính cường lực chống UV, cửa kính trượt và đối trọng.
- ✓ Động cơ DC, EBMpapst – Đức tiết kiệm năng lượng.
- ✓ Chất lượng không khí trong khu vực làm việc: ISO Class 5.
- ✓ Lọc HEPA (H14) hoặc ULPA (U15) từ Camfil – Thụy Điển hoặc AAF – Mỹ với hiệu suất lọc 99.999% tại 0.3 µm (H14) hoặc 99.9999% tại 0.1 µm (U15)

- ✓ Tủ được điều khiển bằng bộ điều khiển tích hợp vi xử lý với màn hình cảm ứng hiển thị tốc độ gió thực, cài đặt thời gian, UV, cảnh báo mở cửa và tốc độ gió theo cài đặt, và có thể hiệu chỉnh trực tiếp trên màn hình về tốc độ quạt.
- ✓ Tủ nghiêng một góc 7° giúp quá trình thao tác dễ dàng
- ✓ Có cổng truy cập cho các phụ kiện như van khí, nước, gas, đầu lấy mẫu đếm tiểu phân online.

HỆ THỐNG DÒNG KHÍ

Hệ thống dòng khí của **HUYAir PWB Elite** hoạt động bằng cách hút không khí xung quanh qua khe phía trước tủ. Lưu lượng dòng khí hút vào được đảm bảo 100% đi qua bộ lọc HEPA, tạo thành dòng khí thẳng đứng đi lên và thoát ra ngoài tủ. Quá trình này đảm bảo không khí trong tủ được lọc sạch, không bị ô nhiễm bởi các hạt bụi hay các chất gây ô nhiễm khác, giúp duy trì môi trường làm việc trong sạch và an toàn.

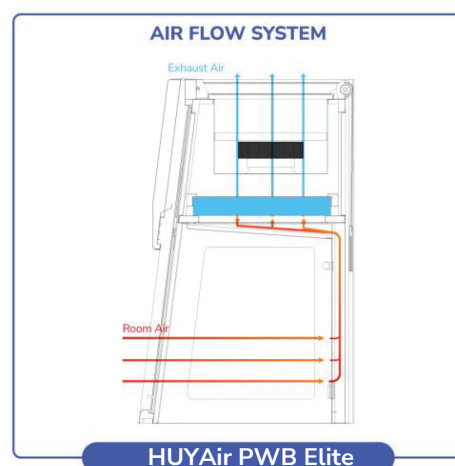

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	I	HUYAir PWB – 900 Elite	I	HUYAir PWB – 1200 Elite
Kích thước ngoài (R x S x C)		900 x 750 x 1200 mm		1200 x 750 x 1200 mm
Kích thước trong (R x S x C)		820 x 530 x 640 mm		1120 x 530 x 640 mm
Model bàn cân chống rung		BB7890		BB78120
Kích thước ngoài bao gồm chân tủ (R x S x C)		900 x 750 x 2000 mm		1200 x 750 x 2000 mm
Điều khiển	Vi xử lý với màn hình cảm ứng 4.3 inch			
Động cơ	DC			
Tốc độ dòng khí	0.3 m/s			
Cường độ ánh sáng	>750 lux			
Độ ồn	<65dB			
Vị trí cân		1		2
Nguồn điện	200 – 240V, 50 / 60 Hz			